

Hoog-laagbed AYLEEN



Inhoud

Het basic hoog-laagbed AYLEEN.	3
Traploze hoogteverstelling	6
Ligvlak	7
Bedfronten	8
Houtlookdessins.	9
Toebehoren.	10
Uitrustingen en opties	11
Technische specificaties	11

Het basic hoog-laagbed AYLEEN

Het hoog-laagbed AYLEEN is een voordelig alternatief voor het IMPULSE premium hoog-laagbed. Het belangrijkste verschil tussen de Edities is de uitvoering van het onderstel. Derhalve kan het basic hoog-laagbed AYLEEN eenvoudig aan allerlei toepassingen binnen de intramurale zorg of thuiszorg worden aangepast.

AYLEEN – de voordelen:

- autocontourpositie van het 4-delige ligvlak
- intuïtief bedienbare handbediening met blokkeerfunctie
- optioneel kiesbare bedfrontdesigns
- diverse houtlookdessins met een natuurlijke uitstraling

- Houten ombouw Eiken licht
- Bedfronten V450
- Doorlopende bedhekken aan beide zijden



AYLEEN Editie 400

Hoog-laagbed met geringe transportafmetingen

Wielen van 100mm met eenwielblokkering zorgen voor een goede wendbaarheid van het basic hoog-laagbed AYLEEN Editie 400. Deze mobiele allrounder is 40 tot 80cm traploos in hoogte verstelbaar* en is het instap-model voor de intramurale en thuiszorg. Het knusse houtlookdessin van de bedombouw kan worden afge-

stemd op de inrichting van de kamer. Dankzij het geringe gewicht en het uit meerdere delen bestaande ligvlak is het bed gemakkelijk te vervoeren. Het Editie 400-bed kan in een handomdraai door één persoon worden klaargezet voor gebruik.

* gemeten aan de bovenkant van het ligvlak

Stabiliteit voor speciale uitdagingen

AYLEEN Editie XL

Het zwaar belastbare hoog-laagbed

Met een veilige werkbelasting van 300 kg is de XL-editie van het AYLEEN-hoog-laagbed speciaal ontworpen voor zwaarlijvige personen. Het versterkte onderstel met 6 dubbele wielen in combinatie met een extreem robuust, stevig gelast metalen raster ligvlak en 2 heavy duty hefmotoren voldoen aan de hoogste eisen inzake stabiliteit en veiligheid.

- Houten ombouw Noten
- Bedfronten V409
- Doorlopende bedhekken aan beide zijden



Met de intuïtieve handbediening van de AYLEEN is een snelle, elektromotorische hoogte- en ligvlakverstelling mogelijk.





Flexibiliteit bij de zorg thuis

AYLEEN Editie 500

Het hoog-laagbed AYLEEN Editie 500 is ontworpen voor gebruik in bestaande bedombouwen. Het inbouwframe wordt in plaats van een lattenbodem gemonteerd, waardoor een gewoon bed over de functies van een elektrisch verstelbaar hoog-laagbed beschikt. Met een veilige werkbelasting van 180 kg is het systeem uiterst stabiel.



Traploze hoogteverstelling

Het ligvlak van het basic hoog-laagbed AYLEEN is traploos in hoogte verstelbaar en kan dus perfect aan de te verlenen zorg worden aangepast.



De autocontourpositie

De gelijktijdige verstelling van de rugleuning en het bovenbeengedeelte brengt de persoon in een comfortabele, rechte lighouding. Ideaal om te lezen of televisie te kijken.

Ligvlak

Het metalen raster ligvlak heeft afneembare raster-elementen, zodat de hoog-laagbedden eenvoudig gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden en optimaal toegankelijk zijn voor onderhoud. De robuuste constructie is uiterst stabiel en beschikt over zeer goede ventilatie-eigenschappen.




Metalen raster ligvlak

Bedfronten

Het AYLEEN-hoog-laagbed is standaard uitgevoerd met het V409-bedfront. Optioneel zijn 5 andere mooie designs verkrijgbaar. Deze kunt u combineren met authentieke houtlookdessins (Pagina 9). U kunt uw creativiteit dus de vrije loop laten.

Bedfront V409

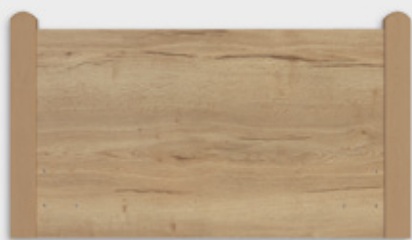

Bedfront V408 (optie)



V450-serie (optie)



V470-serie (optie)



V480-serie (optie)




V490-serie (optie)




Houtlookdessins




Esdoorn

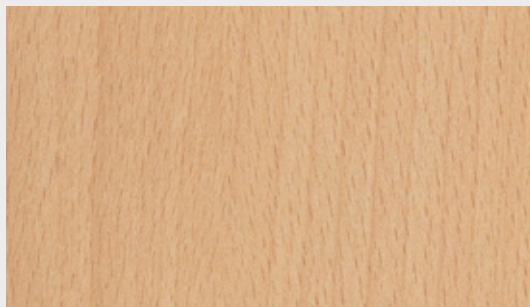


Beuken

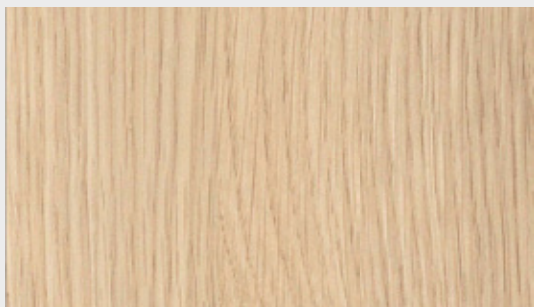


Eiken licht

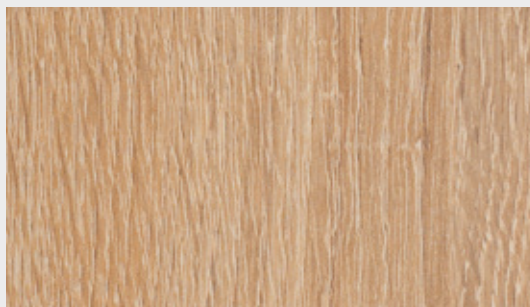

Eiken zand

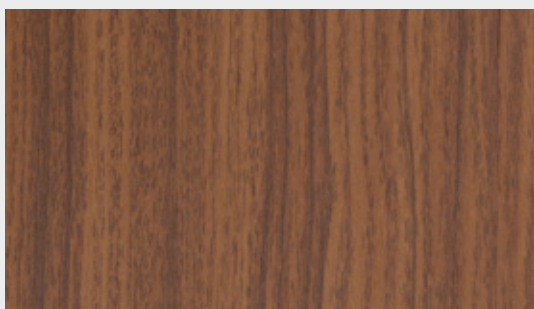

Noten

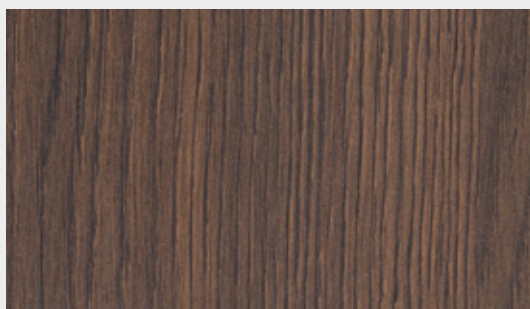

Eiken donker

Bij dit houtdecorprogramma gaat het om reproducties. Kleurbindende decorkeuze is alleen mogelijk aan de hand van originele monsters. Speciale decors zijn beschikbaar op aanvraag tegen een meerprijs.

Toebehoren



Bedpapegaai



Wandafstandhouders



Bedlamp CURA



Nachtkastje WIII



Nachtkastje WI standaard



Server WX L



Ons uitgebreide assortiment toebehoren vindt u in een aparte catalogus.

Wij sturen u graag een exemplaar toe per post.
U kunt ook het PDF-bestand downloaden op
<https://bettenmalsch.com/download>.

Uitrustingen en opties

	Editie 400	Editie XL	Editie 500
Bedverlichting onderzijde	◦	◦	-
Bedhek DS	•	•	-
Zijpaneel bed	◦	◦	-
Dubbele wielen	-	100 mm	-
Enkele wielen	100 mm	-	Pootjes
Comfortabele instaphoogte	30 cm	38 cm	33 cm
Werkhoogte	76 cm	78 cm	78 cm
Autocontourpositie	•	•	•
Metalen raster ligvlak	◦	•	◦
Handbediening met blokkeerfunctie	•	•	•

• standaard ◦ optie

Technische specificaties

Afmetingen en gewichten	Editie 400	Editie XL	Editie 500
Ligvlak	90 × 200 cm	100 × 200 cm	90 × 200 cm
Matrasmaat	88 × 200 × 12 cm	98 × 200 × 14 cm	88 × 200 × 12 cm
Buitenafmetingen	100 × 206 cm	110 × 206 cm	90 × 200 cm
Veilige werkbelasting	max. 180 kg	max. 300 kg	max. 180 kg
Vrije ruimte onder het bed	12 cm	13 cm	-
Totaalgewicht met bedombouw zonder toebehoren	ca. 100 kg	ca. 160 kg	ca. 80 kg

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

