

Uit-bed-detectiesysteem SENSICARE

Voor meer veiligheid en levenskwaliteit



Malsch® SENSICARE

Intuïtief uit-bed-detectiesysteem voor een betere valpreventie

Sensicare van Malsch verhoogt de veiligheid tijdens het verzorgen van personen met dementie of een valrisico. Het intuïtieve uit-bed-detectiesysteem maakt gebruik van intelligente lichtregeling in de kamer van de cliënt om de oriëntatie 's nachts te verbeteren en waarschuwt indien nodig een zorgmedewerker. Met Sensicare behoren tijdrovende nachtelijke controlerondes die de lichte slaap van de cliënten verstoren tot het verleden.

Uitgebreide valpreventie

Bereik maximale veiligheid door dit moderne sensorsysteem te combineren met een extra laag hoog-laagbed van Malsch. Door de lage ligvlakhoogte van slechts 15 cm* zijn ernstige verwondingen als gevolg van onrustig slapen in een bed zonder beddekken vrijwel uitgesloten. Extra veiligheid voor een ontspannen nacht en een ongestoorde nachtrust.

Aantoonbaar 80 % minder valpartijen

We hebben de valverslagen van een aantal instellingen voor en na de invoering van het uit-bed-detectiesysteem geanalyseerd. Het resultaat is overtuigend: na de invoering van Sensicare werden er in de beoordeelde verzorgingshuizen 80 % minder valincidenten gerapporteerd. Ook u kunt profiteren van efficiënte valpreventie en uw zorgpersoneel ontlasten door zinvolle maatregelen te treffen om vallen te verminderen.

Eenvoudig uit te breiden met extra componenten

Het draadloze sensorsysteem kan flexibel worden uitgebreid en biedt de mogelijkheid er draadloze noodknoppen zonder batterijen, deactiveringsschakelaars, raam- en deursensoren enzovoort in op te nemen. U kunt het systeem dus aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

Sensicare garandeert maximale betrouwbaarheid omdat de sensoren zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie en zonder batterijen werken. Een systeem dat zich in de praktijk inmiddels heeft bewezen en al duizenden keren is gebruikt. We bieden 10 jaar garantie op de sensortechnologie en garanderen bovendien dat het systeem compatibel is met alle oproepsystemen. Snelle en eenvoudige naadloze integratie in uw bestaande infrastructuur zonder extra inspanningen en kosten.

Stressvrij werken dankzij intuïtieve bediening

Sensicare is intuïtief in gebruik en vereist geen technische voorkennis of extra apparatuur. In nog geen 5 minuten begrijpen uw zorgmedewerkers hoe het systeem moet worden bediend en kunnen zich daarna weer volledig richten op hun kerntaken, terwijl Sensicare bewaakt of en hoe lang uw cliënten hun bed verlaten.

* gemeten aan de bovenkant van het ligvlak (IMPULSE Editie 500)



OMDAT
VEILIGHEID
TELT

OVERTUIGEND

- ➔ veilige bewaking zonder VBM
- ➔ volledig onderhoudsvrij
- ➔ minimale straling van radiogolven: ongevaarlijk voor cliënten en medische apparatuur. Getest en gecertificeerd.
- ➔ geïntegreerde lichtregeling: betere oriëntatie en minder valpartijen



- afzonderlijk en flexibel in te stellen
- onmiddellijke in- / uit-bed-detectie
- snelle informatie voor zorgmedewerkers
- past gegarandeerd op elk oproepsysteem
- kan tijdens het verzorgen worden uitgeschakeld
- lichtregeling via schakelbaar stopcontact



- rechtsgeldig alternatief voor VBM
- verhoogde veiligheid en betere oriëntatie
- instelbare terugkomsttijd
- minder controlerondes
- snelle hulp voor de cliënten
- hygiënisch en onzichtbaar



Met de draadloze radiografische ontvanger van Malsch kunnen alle componenten van het systeem worden verbonden met het oproepsysteem



Radiografische ontvanger € 140,00


alle prijzen zijn excl. btw en af fabriek
*afhankelijk van het oproepsysteem



Kabel voor aansluiting op het
bestaand oproepsysteem
€40,00 - 60,00*



Onderhoudsvrij. Draadloos. Zonder batterij.

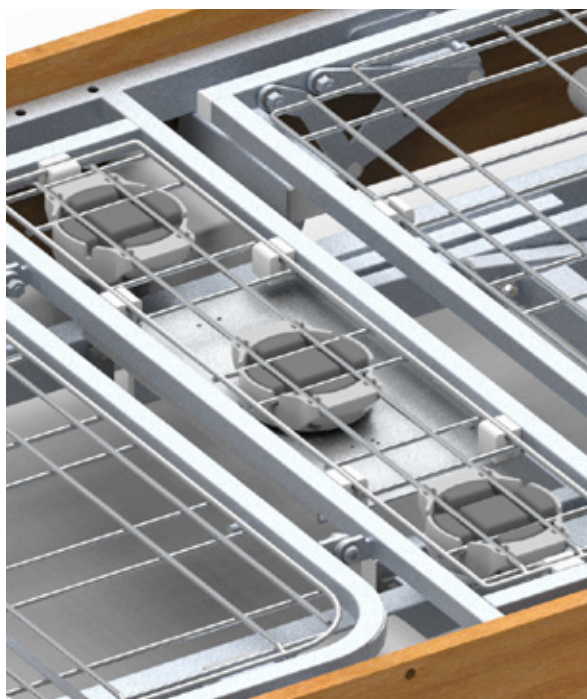

Sensorunit voor Malsch hoog-laagbedden
incl. draadloze ontvanger* € 350,00

Flexibel en onzichtbaar

Zorg voor optimale veiligheid en comfort in uw zorginstelling. Sencicare beschikt over draadloze sensoren zonder batterijen die onopvallend in het ligvlak van onze bedden ingebouwd zijn. De bewegingen in het bed worden door het systeem geregistreerd en kunnen optioneel als bewegingsprofiel via hiervoor geschikte interfaces aan het patiëntendossier worden toegevoegd, zodat bijv. het in een andere houding leggen van de patiënt om decubitus te voorkomen of te behandelen op een wettelijk conforme manier kan worden gedocumenteerd.

De sensoren zijn zelfvoorzienend op het gebied van energie omdat ze zelf de benodigde energie opwekken met behulp van een piëzo-element. Hierdoor zijn ze permanent onderhoudsvrij, wat gunstig is voor het milieu én zorgt voor een betrouwbare alarmafgifte in noodgevallen.

Met Sencicare creëert u een veilige zorgomgeving waarin personen optimaal worden beschermd en uw medewerkers duurzaam worden ontlast. Vertrouw op deze betrouwbare technologie en kies voor effectieve valpreventie met Sencicare van Malsch.



OMDAT
VEILIGHEID
TELT

alle prijzen zijn excl. btw en af fabriek

*zonder verloopkabel voor het oproepsysteem (zie pagina 3)

Uitbreidingsmogelijkheden

Deactiveringsschakelaar

Met de deactiveringsschakelaar kan de uit-bed-detectie tijdelijk worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van zorgtaken of korte controlerondes. De schakelaar schakelt het systeem gedurende 15 minuten uit. Nadat de schakelaar opnieuw is ingedrukt, is het systeem weer actief. Als dit wordt vergeten, wordt de uit-bed-detectie na 15 minuten automatisch weer ingeschakeld. De schakelaar wordt zonder kabels gemonteerd en heeft geen onderhoud nodig.



- om het alarm uit te schakelen
- draadloze montage
- wordt na 15 minuten automatisch opnieuw ingeschakeld

Deactiveringsschakelaar
€ 85,00



Automatisch het licht in-/uitschakelen en extra lichtschakelaar

De meeste valpartijen gebeuren 's nachts. Cliënten lopen in het donker slapend naar het toilet en struikelen – meestal met ernstige gevolgen. Een goede verlichting van een groot gedeelte van de kamer is belangrijk zodat ouderen zich goed kunnen oriënteren. Dit vermindert het risico op vallen aanzienlijk.

In combinatie met de schakelbare draadloze contactdoos is het mogelijk om een lichtbron, bijv. een staande lamp in de kamer, in of uit te schakelen afhankelijk van of er iemand in bed ligt of niet. Zo kan de persoon in kwestie alvast aan de nieuwe situatie wennen, voordat hij of zij de eerste stap zet. Tegen die tijd is de bloedsomloop meestal gestabiliseerd en kan de persoon veilig beginnen te lopen. De extra lichtschakelaar maakt het mogelijk om het licht te regelen onafhankelijk van het feit of er iemand in bed ligt. Met de schakelaar kan bijvoorbeeld de zorgmedewerker de lichtbron handmatig in- en uitschakelen om de cliënt 's nachts te verzorgen. Net als de deactiveringsschakelaar heeft ook de lichtschakelaar noch kabels noch batterijen en kan overal in de kamer worden geïnstalleerd.

Zorg voor een veilige omgeving met het Sensicare-lichtpakket als ideale aanvulling op het uit-bed-detectiesysteem in het hoog-laagbed.

SensiCare – de betere manier om vallen te voorkomen.

Draadloze lichtschakelaar
€ 65,00



- automatische lichtregeling tijdens het verlaten van het bed
- flexibel inzetbaar – voor een betere oriëntatie 's nachts
- elke gewenste lamp kan draadloos worden aangesloten

Schakelbare draadloze stekkerdoos
€ 135,00



Noodknop

Draadloos en dus flexibel in gebruik

Het Sensicare-systeem kan worden uitgebreid met een batterijloze noodknop die na indrukken een zusteroproep activeert via de verbinding met het bestaande oproepsysteem.

Met een draadloos bereik van ca. 35m in gesloten ruimtes en ca. 300m buiten is de opvallende noodknop ideaal als aanvulling voor gebruik in de omgeving van de kamer. De knop is waterdicht en daarom ook goedgekeurd voor gebruik in vochtige ruimtes en buiten.

- kan op elk oproepsysteem worden aangesloten
- geen struikelgevaar door kabels
- overal flexibel inzetbaar
- opvallend en goed zichtbaar te plaatsen
- kan ook met de voet worden geactiveerd





Draadloze noodknoppen

Knop groot €85,00*


Hangkoord €110,00*

Armband €116,00*

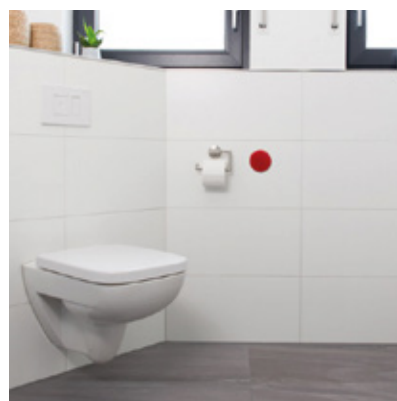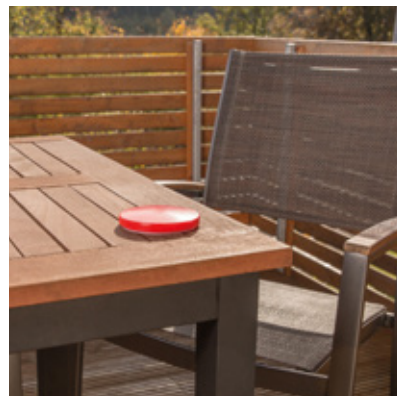

Mobiele noodknop

De noodknop is ook verkrijgbaar als armband of halsketting. Deze vervult dezelfde functies als de grote noodknop en kan om de hals of om de pols worden gedragen.

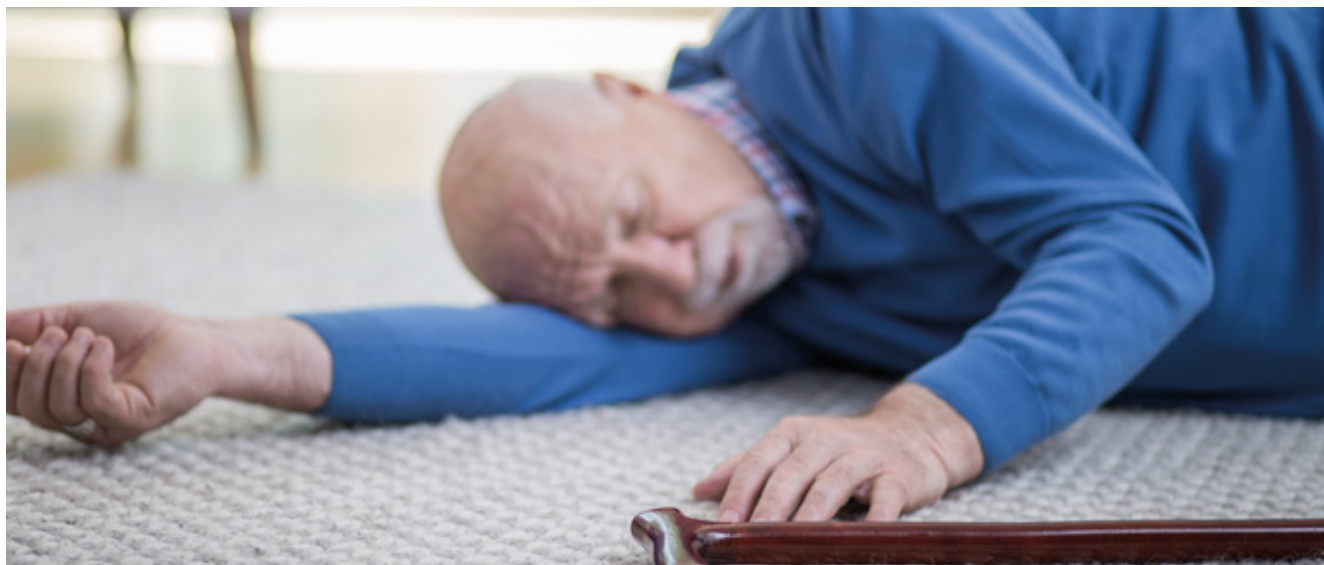

Raam- / deurbewaking

Bewegingsvrijheid in plaats van vrijheidsbeperking – met het raam- en deurbewakingssysteem kunnen mensen met dementie of cognitieve beperkingen toch grotendeels zelfstandig wonen.

Als er een raam of deur wordt geopend door iemand die daar geen toestemming voor heeft, activeert het systeem onmiddellijk een alarm via het oproepsysteem, zodat de zorgmedewerker onmiddellijk kan ingrijpen. Met een deactiveringsschakelaar aan de andere kant van het raam of de deur kan het systeem indien nodig tijdelijk worden uitgeschakeld.

De draadloze onderhoudsvrije module wordt op het deur- of raamkozijn gemonteerd. Het systeem werkt op zonne-energie.

- kan op elk oproepsysteem worden aangesloten
- draadloos en onderhoudsvrij
- kan indien nodig worden uitgeschakeld



Deursensor € 100,00*

Sensorkussen

Het sensorkussen is de ideale aanvulling op het uit-bed-detectiesysteem in het hoog-laagbed. Voor mobiele personen kunnen beide systemen zo gecombineerd worden dat er alleen een alarm afgaat als de persoon binnen een tijdsperiode van 15 minuten niet in bed ligt en zich ook niet op het sensorkussen bevindt, bijvoorbeeld in een fauteuil. Binnen deze drempelperiode kan er continu van plaats worden gewisseld zonder dat het alarm afgaat.



- draadloos, dus flexibel inzetbaar
- kan ook worden gebruikt met een akoestisch alarm, bijv. in gemeenschappelijke ruimten
- geschikt voor elke stoel of fauteuil

Schuimkussen met geïntegreerde draadloze sensor
€ 105,00*



OMDAT
VEILIGHEID
TELT

alle prijzen zijn excl. btw en af fabriek

*Prijzen in combinatie met SENSICARE-uit-bed-detectiesysteem

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel.: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

