

Technische kaart – Pharmasafe® medicijnwagens Ladewagen (LW)

Afbeelding



Wagen op afbeelding: LW (105 cm hoog)

Afmetingen

- De wagens zijn uitgevoerd met laden op telescopische geleiders.
- De afmetingen zijn (BxDxH) (de breedte is incl. duwbeugel): 83,5 x 56 x 105 – 109 cm
- De fronthoogtes zijn variabel in hoogte te verkrijgen;
 - 115 mm
 - 140 mm
 - 190 mm
 - 220 mm
 - 235 mm

Kleuren

Er zijn verschillende kleuren en combinaties mogelijk. Zie kleurkaart voor de actuele kleuren.

Sluitsystemen

Devolgende sluitsystemen zijn mogelijk;

- Sleutel Codeslot
- / RFID Salto
- (voorbereid)

Materialen

- De wagen omhulsel van gelamineerd hout
- Telescopische rails
- Anti-tilt mechanisme / interlock system. Het voorkomt dat meer dan 1 lade tegelijk wordt geopend (kantelen)
- Stalen constructie met stalen duwbeugels
- 125 mm wielen, van polyamide met een polyurethaan loopvlak
- Bovenblad is voorzien worden van een opstaande rand met afgeronde hoeken. Een vlak bovenblad is ook mogelijk.

Tevens kunnen de wagens voorzien worden van accessoire rails (din-rail), aan de zijkanten of aan de achterkant en bijbehorende accessoires

Schoonmaakinstructies

Schoontemaken met gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Toepassing


De Pharmasafe® Ladewagen (LW) is flexibel in terichten en kan voorzien worden van een tablet-laptoophouder.

Verplaatsen

Goedteverplaatsen dankzij de 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.

Garantie

1jaar

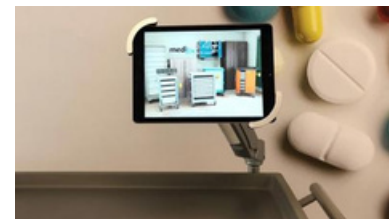

Tablethouder



Laptoophouder



Kunststof bovenblad (PU) met opstaande rand



Bovenblad vlak (hout)

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)

